


# Euroflex Forma N16-2000R

**Eurovema**

Creates mobility and ergonomics.

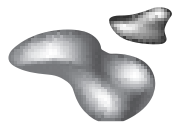

**EUROFLEX®**

CE



# Euroflex Forma N16-2000R - innovative design og fleksibilitet.

Euroflex Forma har en unik sitteergonomi, skapt av en todelt sittepute og et moduloppbygd ryggssystem. Sitteputen består av to formstøpte skumdeler i forskjellige hardheter, slik at de former seg etter formen på bekkenet. Den faste underputen gir støtte under lårene, slik at trykket fordeles jevnere og hindrer at man glir forover i stolen. Den mykere øvre puten gir komfort og avlastning for sittebensknutene (trykkavlastende).

Alle seteinnstillinger kan utføres uten verktøy med ergonomisk utformede spaker. Elektriske setefunksjoner kan fås som tilvalg.



Setetilt



Chassismontert brems



Rygg låsbar

## Grunnleggende:

- Chassi, 100 mm hjul
- Sittesystem Forma
- Armlene faste og nedfellbare til setets overkant
- Sittepute 45x45 cm
- Rygg - 37x23 cm, lav, låsbar
- Setelyft - gas
- Bremsen bremses på bakhjulene
- Setetilt, gassfjær
- Fotstøtte

## Tilbehør

- Sete 40x40, 40x45, 45x45, 50x50, coxit 45x45
- Rygg - høyt; 42x45 cm
- Nakkestøtte - høyt rygg
- Bolstøtte - høyt rygg
- Sidestøtte
- Utfellbart armlene
- Armleneplate lav myk
- Skrittkile/Bendeler
- Setetrek - ryggtrekk - inkontinens
- Bord
- Fotplate, amputasjonsbeinstøtte, Fotstøtte
- Kjørehandtak
- Alternativt hjul 125, 150 mm

## Tekniske fakta:

Klasse Arbeidsstol –

Chassis, bredde

Chassis, lengde

Totalvekt

Brukervekt,

Brems

Hjulstørrelse

Sittebredde (mellom armlenene)

Sittehøyde, gass (høyde til setets overside) trinnløst innstillbar i chassiset.

Standard

Sete, (bredde x dybde) Standard

Sittedybde

Setetilt,

Rotering

Ryggstøtte, høyde

Rygg, yttermål (bredde x høyde) Standard

Møbeltrek

Armlene,

Armleneplate

ISO 180903

57 cm

61 cm

23 kg (gass)

maks. 125 kg

Chassismontert

100 mm

39–53 cm

46–60 cm + 7 cm.

50–70 cm + 7 cm

42–50 cm + 7 cm

45x45 cm

40x40, 40x45, 50x50 cm

40–59 cm

gassfjær 8 grader foran, 12 grader bak

180 grader, låsbar

21–58 cm

37x23 cm

Høy 35x44 cm

Svart Atlantic

høyde Justerbar 0–28 cm

31x8 cm

Sittehøyde, gass (høyde til setets overside) trinnløst innstillbar i chassiset + 7 cm.

**Eurovema**  
Creates mobility and ergonomics.

Eurovema AS, Boks 53, 2021 Skedsmokorset, Svennerudveien 34,  
Frogner | Tel 46301939 | [framapost@eurovema.no](mailto:framapost@eurovema.no) | [www.eurovema.no](http://www.eurovema.no)



Art.nr. BRU-N16-2000R -. Rev: 201605|2